



MARQUE: **SMOOTHSKiN**
REFERENCE: **SMOOTHSKiN BARE NOiR**
CODiC: **4274652**



NOTICE
↓

Bienvenue dans SMOOTHSKIN BARE

Félicitations! Vous venez de pénétrer dans un monde de douceur, de beauté et de commodité sans pareil. Les jours d'épilation difficiles sont officiellement derrière vous! Grâce à votre nouvel épilateur à lumière pulsée Intense (IPL) SMOOTHSKIN BARE, vous aurez une peau douce et soyeuse pendant si longtemps que vous oublierez pour toujours les jambes et les aisselles qui piquent! Dites adieu aux bandes de cires. SMOOTHSKIN est là pour de bon!

Venez participer à la conversation sur notre page salon de beauté à l'adresse www.smoothskin.com où vous pourrez échanger des conseils et obtenir des conseils d'experts pendant toute la durée de votre traitement.

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE	PAGE N°	CHAPITRE	PAGE N°
1.1 AVERTISSEMENTS	2	4.4 MODE DE TRAITEMENT - TAMPON OU GLISSE	11
1.2 PRÉCAUTIONS	5	4.5 ARRÊT DE L'APPAREIL	11
1.3 SÉCURITÉ DES YEUX	6	5.0 ENTRETIEN	11
2.0 INTRODUCTION	8	5.1 EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES	11
2.1 VOTRE APPAREIL SMOOTHSKIN	8	5.2 TABLEAU DES EFFETS SECONDAIRES	12
3.0 MODE DE FONCTIONNEMENT	8	5.3 NETTOYAGE, ENTRETIEN ET STOCKAGE	13
3.1 COMMENT IPL FONCTIONNE-T-IL?	8	5.4 DÉPANNAGE	13
3.2 CE QUE LE PROGRAMME PERMET	9	6.0 INFORMATIONS	14
4.0 UTILISATION	9	6.1 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	14
4.1 DÉMARRER	9	6.2 ÉLIMINATION (fin de vie)	14
4.2 FONCTIONS	10	6.3 GARANTIE	14
4.3 TRAITEMENT	10		

1.1 AVERTISSEMENTS

N'UTILISEZ PAS SMOOTHSKIN BARE si vous avez la peau très foncée (Référez-vous au tableau des couleurs de peau ci-dessous). Les peaux très sombres risquent d'absorber trop d'énergie lumineuse et peuvent être abîmées (par ex. risque de brûlure, de décoloration ou de cicatrice).



N'UTILISEZ PAS SMOOTHSKIN BARE sur une peau récemment bronzée, que ce soit naturellement ou artificiellement. Votre peau peut être particulièrement sensible après avoir été exposée au soleil, et particulièrement susceptible aux effets secondaires du traitement IPL (par ex. brûlure, ampoule, décoloration ou cicatrice sur votre peau). Évitez également l'exposition non protégée à la lumière directe du soleil après avoir effectué le traitement SMOOTHSKIN BARE. Le traitement IPL peut augmenter la sensibilité de votre peau et la rendre particulièrement sensible aux coups de soleil. Appliquez une protection solaire (un facteur de protection FPS d'au moins 15) ou couvrez votre peau.

N'UTILISEZ PAS SMOOTHSKIN BARE directement

sur les mamelons, les parties génitales ou à proximité de l'anus. Ces endroits de la peau peuvent être de couleur plus foncée et/ou d'une plus grande densité pileuse. L'utilisation de l'appareil sur ces zones peut provoquer un certain inconfort/une douleur ou abîmer votre peau (par ex. risque de brûlure, de décoloration ou de cicatrice).

N'UTILISEZ PAS SMOOTHSKIN BARE si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou de lésions pré-cancéreuses (par ex. des naevus ou un grand nombre de grains de beauté)

N'UTILISEZ PAS SMOOTHSKIN BARE si vous êtes concerné par ce qui suit, car SMOOTHSKIN BARE peut être nocif pour votre peau ou bien dégrader votre condition actuelle. Vous pouvez rencontrer des effets indésirables tels que des brûlures, des ampoules, des changements de couleur de la peau (hyper ou hypo-pigmentation) ou la formation de cicatrices :

- Sur des taches brunes ou noires comme des marques de naissance, des grains de beauté ou des verrues sur la zone à traiter.
- Si vous souffrez d'une maladie chronique de la peau (par ex. le psoriasis ou le vitiligo) ou si vous avez une peau endommagée (par ex. des coups de soleil, des coupures, des lésions ouvertes ou des infections actives) sur la zone à traiter.

- Si vous avez des varices sur la zone à traiter.
- Si vous avez un tatouage ou un maquillage permanent sur la zone à traiter.

Si vous êtes sensible à la lumière du soleil (photosensibilité) ou si vous prenez des médicaments susceptibles de rendre votre peau plus sensible ou de provoquer la photo-sensibilité, par ex. Retin A, Accutane et/ou d'autres rétinoïdes topiques.

Si vous prenez des médicaments, lisez toujours la notice d'instructions afin de savoir si la photosensibilité fait partie des effets secondaires possibles. Si vous avez encore des doutes quant à l'utilisation de SMOOTHSKIN BARE, veuillez consulter un professionnel de la santé. Une liste des médicaments susceptibles de causer la photosensibilité est disponible sur le site web de SMOOTHSKIN www.smoothskin.com/fr/assistance

N'UTILISEZ PAS SMOOTHSKIN BARE si vous avez subi un peeling de la peau sur la zone à traiter.

N'UTILISEZ PAS SMOOTHSKIN BARE si vous êtes enceinte, allaitante, car cet appareil n'a pas été testé sur ces personnes.

SMOOTHSKIN BARE n'est pas fait pour être utilisé par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à moins qu'elles n'aient été informés de la manière d'utiliser

l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

SMOOTHSKIN BARE doit être tenu hors de la portée des enfants de moins de 16 ans. Les enfants ne doivent pas utiliser, jouer, entretenir ou nettoyer l'appareil.

Le filtre en verre SMOOTHSKIN BARE est une composante essentielle qui deviendra chaude au cours de l'utilisation.

NE TOUCHEZ PAS le filtre pendant ou immédiatement après l'utilisation. Vérifiez régulièrement le filtre pour s'assurer qu'il n'a pas été endommagé.

N'UTILISEZ PAS SMOOTHSKIN BARE si le filtre est fissuré ou manquant.

1.2 PRÉCAUTIONS

Il est recommandé de ne pas utiliser SMOOTHSKIN BARE sur des poils roux, gris ou très clairs car n'est pas efficace sur ces couleurs de poils.

Sécurité électrique et risque d'incendie

Comme avec tout équipement électrique, certaines précautions doivent être prises pour assurer votre sécurité. **Danger**

N'UTILISEZ PAS si SMOOTHSKIN BARE est endommagé. Par exemple, poignée fissurée, câble endommagé (fils internes apparents), verre fissuré

ou cassé sur la poignée, etc. Les pièces internes contiennent des charges électrique qui peuvent être dangereuses.

N'UTILISEZ PAS l'appareil à proximité de la baignoire, de la douche, des lavabos ou de tout autre récipient contenant de l'eau. Si SMOOTHSKIN BARE est mouillé, il ne doit pas être utilisé. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil s'il a été exposé à l'eau.

N'ESSAYEZ JAMAIS d'ouvrir SMOOTHSKIN BARE, car cela peut vous exposer à des composants électriques dangereux et à une lumière pulsée intense.

N'UTILISEZ PAS l'appareil si la poignée devient désagréablement chaude au toucher. Cela peut vouloir dire que SMOOTH BARE est endommagé.

1.3 SÉCURITÉ DES YEUX

SMOOTHSKIN BARE émet des flashes de lumière pulsée Intense. L'exposition directe est potentiellement nocive pour vos yeux. Veillez à respecter toutes les précautions de sécurité mentionnées ci-dessous. La poignée ne peut être activée (flashée) que si le capteur de teint de peau détecte une lecture de teint de peau valable.

Cependant:

NE REGARDEZ PAS directement dans l'écran de traitement de la poignée lorsque le système est sous tension et est allumé.

N'ESSAYEZ PAS d'activer (flasher) le système en direction de votre œil.

TENTEZ UNIQUEMENT d'activer (flasher) le système si l'avant de la poignée est en bon contact avec la zone à traiter.

Nous vous conseillons de détourner le regard de l'unité avant d'enclencher le bouton de mise en marche.

NE PAS traiter la zone située autour des yeux (les sourcils ou les cils).

SMOOTHSKIN BARE peut être utilisé pour traiter la lèvre supérieure, le menton, les joues, les mâchoires et le cou.

N'ESSAYEZ PAS d'activer (flasher) SMOOTHSKIN BARE sur une surface autre que la peau.

SMOOTHSKIN BARE est destiné à une utilisation mono-utilisateur, il n'est pas réservé aux femmes et il est donc adapté au traitement pour hommes. Il n'est pas conseillé d'utiliser

SMOOTHSKIN BARE pour la barbe de l'homme, du fait que les résultats peuvent être permanents.

Filtre en verre



2.0 INTRODUCTION

2.1 VOTRE APPAREIL SMOOTHSKIN


SMOOTHSKIN BARE fonctionne avec la lumière pulsée Intense, dérivée de la technologie professionnelle IPL. Cela veut dire qu'en matière dépilation, aucun appareil ne vient le rivaliser.



3.0 MODE DE FONCTIONNEMENT

3.1 COMMENT IPL FONCTIONNNE-T-IL ?

SMOOTHSKIN BARE est conçu pour permettre de rompre la phase du cycle pileaire, empêchant ainsi le poil de repousser. L'énergie lumineuse est transférée à travers la surface de la peau et est absorbée par la mélanine contenue dans la tige du poil. Cette énergie lumineuse absorbée est convertie en énergie calorifique (en-dessous de la surface de la peau), empêchant ainsi les poils indésirables de repousser. Vous pouvez vous attendre à voir les poils traités tomber naturellement pendant une période allant de quelques jours à une ou deux semaines.

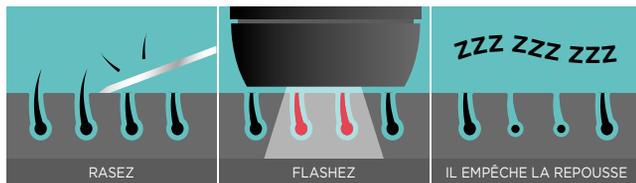

3.2 CE QUE LE PROGRAMME PERMET

Données intéressantes! Les poils poussent en 3 phases distinctes et consécutives et tous les poils ne se trouvent pas tous dans la même phase au même moment. Parce que le traitement IPL n'est efficace que dans une phase spécifique (la 'phase de croissance' Anagen, puisque vous le demandez). C'est pourquoi vous devez suivre votre traitement jusqu'à obtention des résultats souhaités. Si vous suivez le programme de traitement conseillé, vous aurez des chances d'éliminer les poils oubliés lors des précédents traitements. De la simple science!

Le programme de traitement: Tout d'abord, parlons de ce que vous ne devez PAS espérer. Comme pour TOUS les appareils IPL ou de traitements au laser pour un usage domestique (ne croyez pas ceux qui vous diront le contraire), un seul traitement ne dure pas pour toujours. Vous allez devoir continuer à traiter les poils de temps à autre pour éviter que la repousse ne reprenne. Mais l'excellente nouvelle avec SMOOTHSKIN BARE, c'est qu'il empêchera les poils de repousser à partir du moment où vous suivrez des traitements réguliers, alors si vous vous y tenez, vous n'aurez plus jamais de jambes ou d' aisselles qui piquent. Hourra!

Pour tirer le maximum de votre appareil SMOOTHSKIN BARE, vous devez l'utiliser chaque semaine afin de vous assurer que tous les follicules pileux ont été traités. Au cours des semaines qui suivent les premiers traitements, vous continuerez de voir des poils pousser. Détendez-vous. Il est probable qu'il s'agisse de poils oubliés car ils étaient dans leur phase de croissance lors du traitement (lorsque l'IPL est le plus efficace) alors n'arrêtez surtout pas les traitements!

Au bout de 4 semaines, vous devriez voir une réduction de la repousse du poil. Cela ne vous semble-il pas fantastique? Vous verrez des poils qui n'auront pas encore été traités du fait que vous devez attraper chaque poil dans leur « bonne phase », mais ne vous inquiétez pas, cela ira de mieux en mieux par la suite. Alors continuez!

Effets secondaires: Vous ne devriez pas vous attendre à voir d'effets secondaires importants suite aux traitements. Si vous remarquez quoi que ce soit qui vous paraîtrait anormal, reportez-vous à la section 5.2 pour en savoir plus.

Garder la peau douce sur la durée: Bien sûr, la durée du traitement varie pour chacun d'entre nous (car nous avons tous une peau, des cheveux, un style de vie différent...même la génétique joue un rôle!) alors à partir de maintenant c'est à vous de voir quelle est le régime qui vous convient le mieux.

Le secret pour garder une belle peau douce, c'est de suivre votre programme de traitement à la lettre. En l'utilisant régulièrement, vous verrez de moins en moins de poils repousser. Et ces poils devraient aussi être plus fins, de couleur plus claire et repousser plus lentement. Avec le temps, vous pourrez changer du tout au tout vos habitudes de rasage.

Consultez le site Web de SMOOTHSKIN (www.smoothskin.com) où vous trouverez d'autres trucs et conseils utiles sur l'utilisation et sur la manière d'obtenir les meilleurs résultats avec votre SMOOTHSKIN BARE.

4.0 UTILISATION

4.1 DÉMARRER

1. Avant d'utiliser SMOOTHSKIN BARE préparez la zone à traiter afin de vous assurer qu'elle est rasée (en vous assurant d'éliminer tous les poils visibles avant chaque traitement), propre et sèche. Tous les poils restants sur la surface de la peau risquent d'endommager la façade de l'appareil et causer une réaction indésirable. N'oubliez-pas: n'utilisez pas de gel ou de crème avec l'appareil!
2. Allumez l'appareil. Branchez la source d'alimentation à l'aide du câble fourni. Le capteur de teint de peau situé à l'avant de la poignée s'allumera en bleu et le ventilateur se mettra en route.

Vous ne devez pas vous épiler à la cire, vous épiler ou vous arracher les poils situés dans la zone de traitement, car cela éliminera la tige du poil qui absorbe l'énergie lumineuse au cours du traitement.

Arrêtez-vous là! Une chose à la fois...

Avant de procéder au traitement d'une zone, faites un test sur votre peau (sur cette zone) pour éviter une éventuelle réaction à SMOOTHSKIN BARE. La zone de test épicutané doit être environ de 3 cm x 2 cm (l'équivalent de 2 flashes envoyés côte à côte).

1. Suivez les instructions contenues dans la section « Démarrer » avant de commencer comme d'habitude.
2. Traitez la zone.
3. Attendez 24 heures.
4. Si aucune réaction ne se produit au bout de 24 heures, vous pouvez y aller! La « zone du test épicutané » ne doit PAS être re-traitée avant au moins 1 semaine. should NOT be re-treated for at least 1 week.

4.2 FONCTIONS


Captur de teint de peau: SMOOTHSKIN BARE comprend un capteur de teint de peau unique et sophistiqué. Lors du traitement, le capteur cherche en continu un teint de peau valable. Si le capteur de teint de peau ne détecte pas de teint de peau valable, alors la poignée ne pourra pas s'activer. Assurez-vous que la poignée est appuyée contre votre peau, car elle ne peut détecter le teint de peau adéquat que lorsqu'elle est appuyée contre la peau.



4.3 TRAITEMENT

- Tenez fermement la poignée contre la zone à traiter. Les témoins situés autour du bouton de mise en marche s'allumeront en BLANC lorsque l'appareil est prêt à émettre un flash.
- Appuyez sur le bouton de mise en marche. Vous verrez un flash et vous sentirez une sensation de chaleur.
- Placez la poignée sur la prochaine zone à traiter et recommencez!

Assurez-vous de traiter l'ENSEMBLE DE LA ZONE, et traitez les zones difficiles (telles que les aisselles) plusieurs fois (en passant votre appareil sur la même zone un maximum de 3 fois).

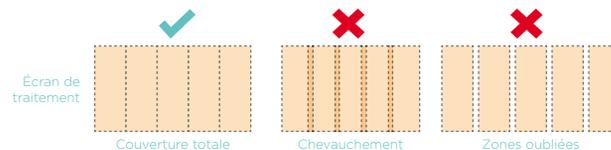

Assurez-vous que les orifices d'aération soient dégagés pendant le traitement, car cela pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil.

SMOOTHSKIN BARE est un appareil extrêmement rapide et puissant. Il vous permettra de traiter tout votre corps en moins de 10 minutes.

Orifices d'aération



4.4 MODE DE TRAITEMENT – TAMPON OU GLISSE

L'appareil propose deux modes de traitement : le « Mode tampon » ou le « Mode glisse ». Quelle que soit la méthode que vous choisissez, vous devez déplacer la poignée entre les flashes pour vous assurer que la zone a été traitée uniformément et qu'aucune zone n'a été oubliée.

Mode tampon

Ce mode est recommandé pour les petites zones telles que les aisselles et le visage. Placez la poignée sur la peau, puis appuyez et relâchez le bouton d'activation. Retirez l'appareil de la peau puis appliquez-le de nouveau avec précaution sur la prochaine zone à traiter.

L'appareil a besoin d'être rechargé entre les flashes. Cette action prend environ une demi seconde.

Mode glisse

Ce mode est recommandé pour les grandes zones, telles que les jambes. Placez la poignée sur la peau, appuyez sur le bouton d'activation et tout en maintenant appuyé, faites glisser la poignée le long de la peau, entre chaque flash. Essayez de garder la poignée à une vitesse constante afin d'obtenir une couverture totale sans chevauchement et sans oublier aucune zone.

4.5 ARRÊT DE L'APPAREIL

Une fois votre traitement terminé, SMOOTHSKIN BARE doit être débranché de la prise de courant. Reportez-vous à la section 5.3 pour des conseils d'entretien détaillés de SMOOTHSKIN BARE.

5.0 ENTRETIEN

5.1 EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

SMOOTHSKIN BARE est un appareil puissant. Certaines personnes peuvent ressentir un léger inconfort (par ex. chaleur ou rougeur sur la peau) au cours de l'utilisation. Cela est normal. Ce type de réaction disparaît habituellement dans les 24 heures. Les effets secondaires ou les réactions sont généralement immédiats ou apparaissent dans les 24 heures.

Si vous avez des doutes, cessez d'utiliser l'appareil SMOOTHSKIN BARE et consultez le site Web SMOOTHSKIN où vous trouverez de l'assistance www.smoothskin.com/fr/assistance.

5.2 TABLEAU DES EFFETS SECONDAIRES

EFFET SECONDAIRE	COMMENT ÉVALUER LES EFFETS ET RÉAGIR
Légère douleur / inconfort dans la zone qui a été traitée.	Ceci est un phénomène normal et attendu pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué dans le guide d'utilisation, et la douleur devrait s'atténuer par l'utilisation continue.
Des sensations de chaleur ou des picotements au cours du traitement, qui disparaissent généralement après quelques secondes ou quelques minutes, et devraient s'atténuer par l'utilisation continue.	Ceci est un phénomène normal et attendu pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué dans le guide d'utilisation.
Démangeaisons dans la zone de traitement.	Il s'agit d'une réaction relativement commune dans les traitements IPL qui devrait s'estomper rapidement. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué dans le guide d'utilisation. Ne vous grattez pas à cet endroit-là.
Des rougeurs cutanées durant ou après le traitement qui disparaîtront au bout de quelques minutes.	Ceci est un phénomène normal et attendu pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué dans le guide d'utilisation une fois que les rougeurs cutanées ont disparu.
Des rougeurs cutanées qui ne disparaissent pas au bout de quelques minutes et qui durent de 24 à 48 heures.	Cessez d'utiliser l'appareil immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser à nouveau.
Une douleur ou un inconfort intense au cours du traitement ou qui persiste après le traitement.	Cessez d'utiliser l'appareil immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser à nouveau.
DANS DE TRÈS RARES CAS	COMMENT ÉVALUER LES EFFETS ET RÉAGIR
Une rougeur et une enflure qui ne disparaissent pas au bout de deux ou trois jours.	Cessez d'utiliser l'appareil immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser à nouveau. Veuillez consulter le site Web SMOOTHSKIN où vous trouverez de l'assistance.
Des changements passagers de couleur de la peau (éclaircissement ou assombrissement).	Si vous constatez un changement de couleur de votre peau, cessez d'utiliser l'appareil immédiatement et consultez votre médecin. Veuillez consulter le site Web SMOOTHSKIN où vous trouverez de l'assistance.
Formation d'ampoules ou de brûlures de la peau.	Cessez d'utiliser l'appareil immédiatement et consultez votre médecin avant de l'utiliser à nouveau. Appliquez un bloc réfrigérant sur cette zone. Appliquez un antiseptique ou une crème anti-brûlures. Veuillez consulter le site Web SMOOTHSKIN où vous trouverez de l'assistance.

5.3 NETTOYAGE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Lorsque le traitement est terminé, éteignez toujours SMOOTHSKIN BARE et débranchez-le de la prise de courant.
- Après l'utilisation, la poignée doit être vérifiée pour s'assurer qu'elle n'a pas été endommagée et essuyée à l'aide d'un chiffon sec sans peluche.

ATTENTION: Le filtre en verre peut chauffer pendant l'utilisation. **NE TOUCHEZ PAS** et ne nettoyez pas le filtre pendant au moins 5 minutes après utilisation pour qu'il refroidisse.

N'UTILISEZ JAMAIS de l'eau ou d'autres nettoyants liquides, car ceux-ci risquent d'endommager l'appareil et constituent un danger potentiel en matière de sécurité.

Afin de garantir la performance maximale de votre SMOOTHSKIN BARE, il est particulièrement important de vérifier que le réflecteur et le capteur de teint de peau sont exempts de poussières, poils, ou autres débris.



- Rangez SMOOTHSKIN BARE dans un endroit propre et sec. Assurez-vous que le écran de traitement et que les capteurs de teint de peau de la poignée sont protégés d'éventuels dommages.
- Vérifiez régulièrement l'appareil (y compris les cordons) afin de vous assurer qu'ils ne présentent pas de dommages visibles. Si vous constatez que l'appareil est endommagé ou fissuré, cessez d'utiliser l'appareil et consultez le site Web où vous trouverez de l'assistance.

5.4 DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Les témoins lumineux du bouton de mise en marche situés sur la poignée ne s'allument pas lorsque l'appareil est placé contre votre peau.	Assurez-vous que la source d'alimentation est branchée. Vérifiez que le capteur de teint est entièrement appuyé contre votre peau. Il se peut que votre peau soit trop sombre pour le traitement. Consultez le tableau des couleurs de peau au début de ce guide d'utilisation.
Le bouton de mise en marche situé sur la poignée s'allume en blanc lorsqu'il est placé contre votre peau, mais la poignée n'émet aucun flash lorsque le bouton de mise en marche est activé.	Cela peut vouloir dire que l'appareil est défaillant. Débranchez l'appareil et recommencez. Si le problème persiste, consultez le site Web où vous trouverez de l'assistance.
Les témoins lumineux du bouton de mise en marche situés sur la poignée sont allumés en rouge en continue mais l'appareil ne fonctionne pas.	Cela veut dire que l'appareil est défaillant. Cessez d'utiliser l'appareil et consultez le site Web où vous trouverez de l'assistance.
La poignée, l'écran de traitement, la source d'alimentation ou les cordons de SMOOTHSKIN sont endommagés, cassés, fissurés ou semblent défectueux.	NE L'UTILISEZ PAS. Si vous doutez de la sécurité de SMOOTHSKIN BARE ou si vous soupçonnez qu'il présente un dommage quelconque, il ne doit pas être utilisé, et vous devez consulter le site Web où vous trouverez de l'assistance.

6.0 INFORMATIONS

6.1 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SMOOTHSKIN BARE est un système de lumière Intense pulsée qui utilise un filtre d'émission à large bande qui est caractérisé par les spécifications techniques suivantes :

- **Taux de répétition:** Pulsation manuelle toutes les 0,60 secondes
- **Fonctionnement continu**
- **Sortie optique maximale:** 3J/cm²
- **Durée d'impulsion:** 1msec FWHM
- **Entrée de la ligne d'alimentation:** 100-240V-, 50/60Hz, 1.3-0.55A
- **Température de fonctionnement:** Entre 5°C et 40°C
- **Humidité tolérée en fonctionnement:** Jusqu'à 93 % d'humidité relative, sans condensation
- **Pression de fonctionnement:** 700hPa to 1060hPa
- **Zone de traitement (taille de la surface à traiter):** 3 cm² (30mm x 10mm)

Conditions de transport:

- **Température:** De -25°C à +70°C
- **Humidité:** Jusqu'à 93 % d'humidité relative, sans condensation
- **Pression:** De 500hPa à 1060hPa

SMOOTHSKIN BARE est conçu pour émettre un nombre illimité de flashes et est destiné à une utilisation mono-utilisateur.

Le label CE certifie que cet appareil est conforme aux directives de la CEE suivantes:

- **Directive relative à la basse tension 2014/35/UE**
- **Directive concernant la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE**
- **Directive concernant les produits liés à l'énergie 2009/125/CE.**

6.2 ÉLIMINATION (fin de vie)

Afin de réduire les risques pour la santé ou l'environnement et en vue de garantir le recyclage des matériaux, ce produit doit être recyclé séparément dans un centre de déchets d'équipements électriques et électroniques. Le pictogramme représentant une poubelle barrée apposé sur le produit est là pour vous le rappeler.

6.3 GARANTIE

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit à partir de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous réparerons gratuitement les défauts de matériau ou de fabrication et remplacerons gratuitement l'appareil. Cette garantie s'applique à tous les pays dans lequel le dispositif est commercialisé par Cyden Ltd ou par son distributeur désigné.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation incorrecte, de l'usure normale d'utilisation ainsi que les défauts qui auraient un effet négligeable sur la valeur ou sur le fonctionnement de l'appareil. La garantie est annulée dans le cas où les réparations ont été réalisées par des personnes non autorisées et dans le cas où les pièces d'origine SMOOTHSKIN BARE n'ont pas été utilisées. Pour bénéficier du service de garantie pendant la période couverte par cette garantie, veuillez consulter notre site web: www.smoothskin.com/fr/assistance