



MARQUE: SCHOLL

REFERENCE: DR1120 E CEINTURE

CODIC: 3188949



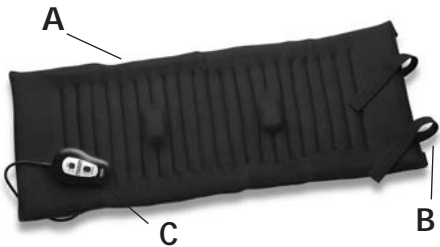


Figure A

## **BIENVENUE DANS LA FAMILLE SCHOLL**

Merci d'avoir acheté Ceinture de massage chauffante Scholl. Toute la gamme des masseurs corporels Scholl a été développée dans le but de vous faire profiter des bienfaits des massages. Nous avons travaillé en collaboration avec des masseurs thérapeutes afin que vous puissiez tirer le meilleur parti possible de votre produit. Pour de plus amples renseignements sur la meilleure manière d'utiliser votre masseur, veuillez vous référer à la section « utilisation » de votre manuel. **Détendez-vous c'est Scholl.**

- A. CHALEUR APAISANTE ET MASSAGE PAR VIBRATIONS RELAXENT LES MUSCLES TENDUS
- B. SANGLES DE MAINTIEN AUTOMATIQUE
- C. RÉGLAGE DES NIVEAUX DE CHALEUR ET DE MASSAGE FACILE À UTILISER

# CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Cet appareil est réservé à l'usage domestique.

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

## À propos de votre enveloppe de massage

Les produits Scholl vous offrent aujourd'hui toute une nouvelle génération de confort grâce à l'enveloppe de massage corporel à chaleur. Cette enveloppe s'enroule autour de n'importe quelle partie du corps, et procure chaleur apaisante et massage délicat pour éliminer la tension et le stress accumulés tout au long de la journée.

### Arrêt automatique

Par mesure de sécurité, cette enveloppe de massage est équipée d'un minuteur qui arrête l'appareil après 20 minutes d'utilisation.

### Conseil d'utilisation

1. Vérifiez que tous les interrupteurs sont en position d'arrêt OFF (O). Branchez le cordon de raccordement dans la télécommande manuelle, puis branchez le cordon sur l'alimentation secteur.
2. Enveloppez la partie de votre corps que vous souhaitez masser dans le masseur corporel et attachez-le avec les sangles de maintien automatique.
3. Pour diffuser la chaleur, mettez le bouton rouge de chaleur en position de marche ON (I) (voir la figure A).
4. Pour diffuser un massage par vibrations, positionnez le sélecteur bleu de massage sur HIGH (II) pour un massage revigorant, ou sur LOW (I) pour un massage plus doux (voir la figure A).
5. Vous pouvez utiliser les réglages de chaleur et de massage ensemble ou séparément.
6. Les réglages fonctionnent uniquement si l'appareil est branché sur le secteur.
7. **NE PAS UTILISER** pendant plus de 15 minutes en continu.

---

## TABLE DES RÉGLAGES

---

### MASSAGE

II (Fort)  
O (Arrêt)  
I (Faible)

### CHALEUR

I (Marche)  
O (Arrêt)

---

## IMPORTANT : PRECAUTIONS D'UTILISATION

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de base doivent toujours être suivies. Y compris celles-ci :

### **DANGER: Pour réduire le risque d'électro-choc.**

1. Débranchez toujours cet appareil de la prise de courant après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer.
2. **N'ESSAYEZ** en aucun cas de récupérer un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
3. **N'UTILISEZ** pas cet appareil dans votre bain, ni sous la douche.
4. **NE PLACEZ** ou n'entrez pas l'appareil dans un endroit où il serait susceptible de tomber dans un lavabo ou dans une baignoire. **NE LE PLACEZ** jamais, et ne le faites jamais tomber, dans de l'eau ou tout autre liquide.

## **ATTENTION : Pour éviter les risques de brûlure, feu, électro-choc ou de blessures.**

1. Ne laissez jamais cet appareil branché lorsque vous ne vous en servez pas.
2. Ne le faites pas fonctionner sous une couverture ou sous un oreiller. Une chaleur excessive accentue les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures.
3. Une surveillance minutieuse est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur, ou près d'enfants ou de personnes handicapées ou infirmes.
4. N'utilisez cet appareil que pour l'emploi prévu et décrit dans ce manuel. **N'UTILISEZ** pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
5. Ne faites jamais fonctionner cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est endommagé, ou s'il a subi une chute.
6. **NE TENEZ** pas cet appareil par le cordon, et ne tirez jamais dessus pour déplacer l'appareil.
7. Tenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
8. **N'UTILISEZ** jamais l'appareil à l'extérieur.
9. Pour déconnecter l'appareil, mettez toutes les commandes sur la position Arrêt. Puis débranchez la prise de courant.

Utilisez uniquement avec un adaptateur c.a. AEN5422191

**ATTENTION :** Une imprudence peut causer un incendie

### **Entretien de l'appareil**

- Conservez l'enveloppe de massage dans un endroit sûr, frais et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée..
- Essuyez-le uniquement avec un tissu doux et humide, en utilisant un produit nettoyant non abrasif.
- Ne plongez jamais l'appareil dans quelque liquide nettoyant que ce soit.
- **NE PAS** laver à sec.
- **N'ESSAYEZ** En Aucun cas de réparer cet appareil. Il n'existe aucune pièce détachée disponible à la vente.

---

## **GARANTIE LIMITÉE À DEUX ANS**

Cet appareil est garanti contre les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une durée de deux ans à compter de la date d'achat. Rappelez simplement l'appareil chez le détaillant chez qui vous l'avez acheté pour un échange gratuit. Tout autre problème résultant d'une mauvaise manipulation, de tentatives de réparation, d'une chute ou d'une usure extrême ne sont pas couverts par cette garantie.

Pour une réparation hors garantie, téléphonez au service après-vente 33146038770

Helen of Troy France  
92 Avenue du Général Leclerc  
92100 Boulogne Billancourt  
France

Ce produit porte la mention CE et est fabriqué en conformité avec le Directive sur l'Electromagnétique 89/336/CEE.

---

**Note à l'attention de l'utilisateur :**  
**NE PAS utiliser le masseur sur les parties du corps et dans les conditions suivantes :**

- A. Toute partie du corps enflée, brûlée, enflammée ou

toute plaie ou éruption de la peau.

- B. Toute partie du corps anesthésiée, sauf avis favorable du médecin.
- C. L'abdomen, en cas de douleur.
- D. Les jambes, en cas de varices.
- E. Les mollets, en cas de douleur inexplicée.
- F. Sur, ou autour de la carotide, des deux côtés du cou.
- G. Le massage doit être une expérience agréable et confortable. Si une gêne, apparaît, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.
- H. L'utilisation de cet appareil n'est PAS recommandée pour les femmes enceintes.

© 2003 SSL International plc  
Distribué par Helen of Troy L.P. El Paso, Texas USA  
Sous licence de SSL International plc

Pour plus d'informations, visitez notre site  
<http://www.HelenofTroyUSA.com>