



**MARQUE:** BEURER  
**REFERENCE:** FC 72  
**CODiC:** 4323319



**NOTICE**  
↓



- |   |   |
|---|---|
| <b>(D)</b> Ionen-Gesichtssauna<br>Gebrauchsanweisung .....2-7             | <b>(RUS)</b> Сауна для лица<br>с ионизацией<br>Инструкция<br>по применению .....38-44 |
| <b>(GB)</b> Ionic facial sauna<br>Instruction for Use .....8-13           | <b>(PL)</b> Jonowa sauna do twarzy<br>Instrukcja obsługi ..... 45-50                  |
| <b>(F)</b> Sauna facial ionique<br>Mode d'emploi..... 14-19               | <b>(NL)</b> Ionen-gezichtssauna<br>Gebruiksaanwijzing.....51-56                       |
| <b>(E)</b> Sauna facial iónica<br>Instrucciones para<br>el uso .....20-25 | <b>(P)</b> Sauna facial ionizante<br>Instruções de<br>utilização.....57-62            |
| <b>(I)</b> Sauna per il viso agli ioni<br>Istruzioni per l'uso .....26-31 | <b>(GR)</b> Σάουνα προσώπου με ιόντα<br>Οδηγίες χρήσεως.....63-68                     |
| <b>(TR)</b> İyonlu yüz saunası<br>Kullanım kılavuzu .....32-37            |   |

## Sommaire

1. Contenu de la livraison.....	14	7. Utilisation.....	18
2. Consignes de sécurité .....	15	8. Nettoyage.....	19
3. Familiarisation avec l'appareil .....	16	9. Élimination des déchets.....	19
4. Utilisation conforme aux recommandations	16	10. Données techniques .....	19
5. Description de l'appareil .....	17		
6. Mise en service .....	17		

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits. Notre société est réputée pour l'excellence de ses produits et les contrôles de qualité auxquels ils sont soumis. Nos produits couvrent les domaines de la chaleur, du poids, de la pression sanguine, de la température corporelle, de la thérapie douce, des massages, de la beauté, du bébé et de l'amélioration de l'air. Lisez attentivement cette notice, conservez-la pour un usage ultérieur, mettez-la à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

Sincères salutations,  
Votre équipe Beurer

**1. Contenu de la livraison**

- 1 Sauna facial ionique FC 72
- 1 Verre doseur
- 1 Mode d'emploi








**⚠ AVERTISSEMENT**

- L'appareil est uniquement conçu pour un usage dans un environnement domestique/privé, et non pas pour le domaine professionnel.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans ainsi que les déficients physiques, sensoriels ou mentaux et les personnes ayant peu de connaissances ou d'expérience à la condition qu'ils soient surveillés ou sachent comment l'utiliser en toute sécurité et en comprennent les risques.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation électrique de l'appareil est endommagé, il doit être mis au rebut. S'il n'est pas détachable, l'appareil doit être mis au rebut.

## 2. Consignes de sécurité

### Symboles utilisés

Les symboles suivants sont utilisés sur le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

 Avertissement	Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé.
 Attention	Ce symbole vous avertit des éventuels dommages au niveau de l'appareil ou d'un accessoire.
	<b>RISQUE</b> L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou dans l'eau (par exemple, lavabo, douche, baignoire) – Risque d'électrocution !
	Le symbole CE atteste que ce produit répond aux exigences de la Communauté européenne imposées au fabricant.
	Élimination conformément à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques
	Fabricant
	L'appareil bénéficie d'une double isolation de protection et répond ainsi à la classe de sécurité 2.

### Consignes de sécurité importantes avant utilisation

#### Avertissement

- L'appareil est conçu uniquement pour l'utilisation décrite dans ce mode d'emploi. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou non conforme. Cet appareil n'est pas prévu pour un usage et une exploitation professionnelle dans le secteur médical. Utilisez cet appareil uniquement pour un usage domestique privé.
- Les réparations peuvent être effectuées uniquement par les centres de service autorisés, car elles nécessitent des pièces et des outils spéciaux. Dans le cas contraire, la garantie est annulée.
- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez d'une pathologie cardiaque, de rougeurs, inflammations, gonflements, zones sensibles, diabète, plaies, brûlures, eczéma ou psoriasis.
- En cas de grossesse ou de problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Les enfants ne sont pas conscients des dangers liés aux appareils électriques. Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas être utilisé par des enfants sans surveillance.
- Vérifiez avant chaque utilisation que l'appareil et le câble d'alimentation sont intacts. En cas d'endommagements, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez que la tension locale correspond à la tension indiquée sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau (par ex. près d'une baignoire, d'un évier, etc.).
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous prenez un bain, une douche ou lorsque vous dormez.
- N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides. Conservez l'appareil dans un endroit sûr.
- Ne posez pas l'appareil sur des surfaces sensibles à l'eau !
- Tenez l'appareil et le câble d'alimentation éloignés des surfaces chaudes.

## Consignes de sécurité importantes lors de l'utilisation

### Avertissement

- En cas de perturbation lors de l'utilisation, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez la prise du secteur.
- Lors de l'utilisation, n'approchez pas votre visage à moins de 25 cm de la buse, sinon vous risquez de vous brûler avec la vapeur chaude. Lors de l'utilisation, fermez les yeux et protégez les zones sensibles à la chaleur.
- N'utilisez pas l'appareil plus de 15 minutes.
- Ne secouez pas l'appareil lors de son utilisation. Vous risquez de vous ébouillanter ou de vous brûler.
- Interrompez l'utilisation en cas de douleurs ou d'indispositions et consultez votre médecin.
- N'utilisez pas l'appareil sous des couvertures, serviettes, etc.
- Retirez vos bijoux du cou et du visage avant chaque utilisation.
- Si l'appareil est tombé dans l'eau par inadvertance, débranchez immédiatement la prise. Faites vérifier l'appareil par un électricien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.

## Consignes de sécurité importantes après utilisation

### Attention

- Éteignez l'appareil après son utilisation et débranchez la prise du secteur.
- Ne débranchez jamais la prise du secteur en tirant sur le câble ou avec des mains humides.
- Nettoyez l'appareil après utilisation afin d'éviter l'accumulation de graisse et d'autres résidus. Ceci permet de garantir un fonctionnement optimal et de prolonger la durée de vie de l'appareil.
- Laissez entièrement refroidir l'appareil avant de le réutiliser.
- Pour toute question concernant l'utilisation de nos appareils, adressez-vous à votre revendeur ou à notre service clients.

## 3. Familiarisation avec l'appareil

L'utilisation du sauna facial ionique FC 72 offre un point de départ idéal pour le soin de beauté du visage. La peau de votre visage est ainsi préparée de façon optimale à d'autres traitements, comme le nettoyage en profondeur, les masques, etc.

Les salons de beauté débutent très souvent leurs soins du visage par un traitement à la vapeur. La vapeur revigorante facilite la circulation sanguine de la peau, ouvre les pores et rend les impuretés plus faciles à éliminer.

Vous bénéficiez ainsi d'un bon point de départ pour chaque type de soin du visage. Grâce à l'ouverture des pores, les produits de soin peuvent pénétrer en profondeur dans la peau et voir leur effet amélioré.

Le sauna facial FC 72 dispose d'un générateur d'ions intégré. Celui-ci réalise un enrichissement des molécules d'eau émanant de la peau avec des ions et assure une purification avancée de la vapeur. Les ions offrent ainsi une hydratation approfondie du visage, ainsi que la formation d'un épiderme plus doux et d'une structure de tissus cutanés de meilleure qualité.

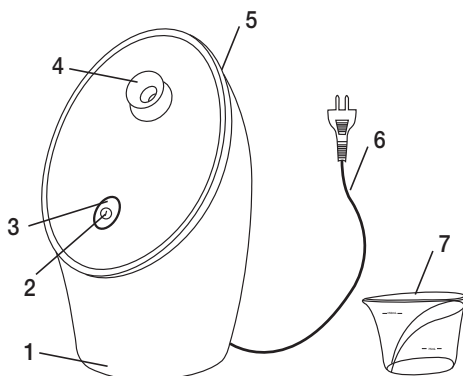
## 4. Utilisation conforme aux recommandations

Cet appareil est conçu exclusivement pour une utilisation sur le visage humain.

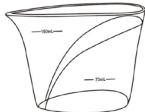
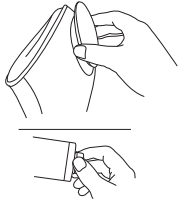

N'utilisez pas l'appareil sur des animaux !

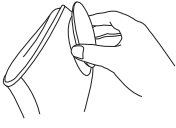
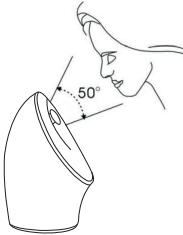
## 5. Description de l'appareil

1. Appareil de base
2. Touche MARCHÉ/ARRÊT
3. Réservoir d'eau
4. Buse réglable
5. Ouverture du réservoir d'eau
6. Prise
7. Verre doseur



## 6. Mise en service

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installez l'appareil sur une surface ou une table plane, solide, stable et ne craignant pas l'eau. Ne jamais tenir l'appareil dans les mains pendant l'utilisation.</li> </ul>	
<p><b>⚠ Attention</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez l'appareil uniquement avec de l'eau distillée ! N'utilisez pas d'eau du robinet qui pourrait occasionner des dépôts de calcaire dans l'appareil et ainsi altérer son fonctionnement et sa durée de vie. N'utilisez pas d'huile, d'herbes ou d'autres substances aromatisantes <u>à la place</u> de l'eau.</li> <li>• Remplissez le verre doseur fourni avec de l'eau distillée.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Eau distillée</b></p> <p style="text-align: center;">↓</p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prélevez le réservoir et ouvrez la fermeture à vis.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versez lentement et soigneusement l'eau distillée à l'aide du verre doseur dans le réservoir d'eau au moins jusqu'au repère « min » et au maximum jusqu'au repère « max ». La quantité d'eau à hauteur de remplissage maximum est suffisante pour une utilisation d'environ 15 minutes. Refermez le réservoir d'eau avec la fermeture à vis.</li> </ul>	

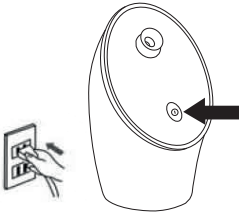
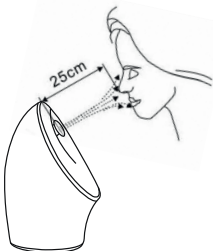
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacez le réservoir d'eau dans l'appareil jusqu'à l'entendre s'enclencher.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez l'angle de la buse à la hauteur souhaitée.</li> </ul> <p><b>⚠ Attention</b> Ne réglez pas la buse lorsqu'elle est en fonctionnement ! Vous risqueriez de vous brûler les doigts.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez votre visage avec une serviette humide avant utilisation.</li> </ul>	

## 7. Utilisation

N'utilisez pas le sauna facial ionique au-delà de 15 minutes par jour. Une utilisation de 2 à 3 fois par semaine est recommandée.

Une fois les préparations nécessaires du « Chapitre 6. Mise en service » effectuées, vous pouvez commencer à utiliser votre appareil.

Pour commencer l'utilisation, suivez les étapes suivantes :

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Branchez la prise au secteur et appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT. Le témoin de contrôle s'allume en bleu et la fonction ions est activée. L'appareil commence à chauffer l'eau distillée. Après environ 30 secondes, la vapeur commence à s'échapper de la buse. Après environ 1 minute, la vapeur est suffisamment importante et vous pouvez commencer le traitement.</li> <li>• En appuyant à nouveau sur la touche MARCHE/ARRÊT, le témoin de contrôle s'allume en rouge et la fonction ions est désactivée.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placez lentement votre visage en direction du jet de vapeur, de sorte que l'intégralité de votre visage soit couvert de vapeur et que son effet soit agréable et ne soit pas trop chaud. Si l'effet de la vapeur est trop chaud, éloignez-vous de la buse pour éviter de vous brûler.</li> </ul> <p><b>⚠ Avertissement</b> Veillez à ne pas approcher votre visage à moins de 25 cm de la buse. Vous risquez sinon de lui infliger des rougeurs ou des brûlures.</p>	

L'appareil s'éteint automatiquement quand il ne contient plus d'eau ou après 15 minutes.

- Déconnectez maintenant la fiche de la prise.
- Lavez votre visage à l'eau froide après utilisation. Appliquez désormais une crème ou un masque de visage. Les pores ouverts font pénétrer les substances en profondeur dans la peau.
- Laissez refroidir l'appareil pendant 10 minutes. Passez ensuite au nettoyage de l'appareil, comme décrit dans le chapitre « 8. Nettoyage ».

## 8. Nettoyage

Assurez-vous d'avoir débranché la prise avant le nettoyage.


- Videz et nettoyez le réservoir d'eau après chaque utilisation et enlevez la graisse ou les autres impuretés
- Le réservoir d'eau est adapté au lave-vaisselle et peut y être lavé le cas échéant.
- Remplacez le réservoir d'eau dans l'appareil après le nettoyage.
- Nettoyez la buse et l'appareil de base avec un chiffon doux et légèrement humide, puis essuyez-le.

## 9. Élimination des déchets

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.



## 10. Données techniques

N° du modèle	FC 72
Alimentation électrique	220-240V-50/60Hz
Puissance	260 W
Classe de sécurité	II / 
Durée d'utilisation	max. 15 min